

Lagerungshilfen





Heavenly Foam Mattress mit Baumwoll-
bezug



Baumwollbezug



Einwegbezug

Heavenly Foam Mattress

Die Heavenly Foam Mattress ist eine viskoelastisch Matratze aus latexfreiem Memory-Schaum und verfügt über eine besonders weiche und anschmiegsame Oberfläche. Die Matratze schwächt Druckpunkte ab, schützt die zarte Haut der Frühgeborenen und ermöglicht eine physiologische Lagerung.

Durch die materialspezifischen Eigenschaften des Schaumes können die Positionen des Säuglings verändert und dadurch die Druckpunkte verlagert werden. Die Matratze ist überall einsetzbar, wo Auflagedruck reduziert werden soll - außerdem schützt sie den Säugling vor Vibrationen und Stößen.

Durch die Vinylbeschichtung lässt sich die Matratze einfach aufbereiten und in Kombination mit den Einwegbezügen ist dieses Lagerungssystem besonders hygienisch. Die speziellen Baumwoll- und Einwegbezüge unterstützen die Weichheit der Heavenly Foam Mattress.

Unsere Lagerungshilfen sind vielseitig kombinierbar. Die Heavenly Foam Mattress kann dabei als weiche und anschmiegsame Grundlage eingesetzt werden. Um räumliche Begrenzung zu schaffen und dem Säugling ein Gefühl von Schutz und Geborgenheit zu vermitteln kann der BedBuddy um den Säugling gelegt werden.

Zur Lagerung des Köpfchens können entweder die Nackenrolle oder Medibino® kombiniert werden. Als weitere Option kann der Cuddle Up Bezug mit weichen Bändchen in Kombination mit der Heavenly Foam Mattress taktile Reize senden und in Seiten- und Rückenlage dem Kind Sicherheit und räumliche Begrenzung vermitteln.

Bestellinformationen

Produktbeschreibung	VPE	Art.-Nr.
Größe: Ultra Preemie (XS) - für kleine Frühgeborene		
Heavenly Foam Mattress Vinyl, abwaschbar, Größe: 25,5 x 34 x 1,6cm, ohne Bezug	6 Stück	SMB170
Baumwollbezüge waschbar, für Heavenly Foam Mattress	10 Stück	SMB170MW
Einwegbezüge für Heavenly Foam Mattress	20 Stück	SMB170EW
Heavenly Foam Mattress, Größe: 25,5 x 34 x 1,6cm mit Matratzenschonbezug	10 Stück	SMB172
Matratzenschonbezug Einweg, wasserabweisend für den Matratzenkern der Heavenly Foam Mattress Größe: 25,5 x 34 x 1,6cm	20 Stück	SMB172EW
Größe: Preemie & Newborn (M) - für Früh- & Reifgeborene		
Heavenly Foam Mattress Vinyl, abwaschbar, Größe: 51 x 34 x 3,2cm, ohne Bezug	8 Stück	SMB171
Baumwollbezüge waschbar, für Heavenly Foam Mattress	10 Stück	SMB171MW
Einwegbezüge für Heavenly Foam Mattress	10 Stück	SMB171EW
Heavenly Foam Mattress, Größe: 51 x 34 x 1,6cm mit Matratzenschonbezug	24 Stück	SMB173
Matratzenschonbezug Einweg, wasserabweisend für den Matratzenkern der Heavenly Foam Mattress Größe: 51 x 34 x 1,6cm	20 Stück	SMB173EW

Cuddle Up

Die Cuddle Up Bezüge sind mit weichen Bändern ausgestattet, die neben räumlicher Begrenzung dem Säugling das Gefühl des Gehaltenwerdens vermitteln, Sicherung in Seitenlage ermöglicht und so Behaglichkeit in der Liegeumgebung des Säuglings schafft.



Heavenly Foam Mattress mit Baumwollbezug Cuddle Up



Baumwollbezug mit Bändchen

Bestellinformationen

Produktbeschreibung	VPE	Art.-Nr.
Größe: Ultra Preemie (XS) - für kleine Frühgeborene		
Cuddle Up Baumwollbezug (nur Wickeltuch)	10 Stück	SMB170MWC
Cuddle Up Einwegbezug (nur Wickeltuch)	20 Stück	SMB170EWC
Größe: Preemie & Newborn (M) - für Früh- & Reifgeborene		
Cuddle Up Baumwollbezug (nur Wickeltuch)	10 Stück	SMB171MWC
Cuddle Up Einwegbezug (nur Wickeltuch)	20 Stück	SMB171EWC



Einwegbezug mit Bändchen



Baumwollbezug Cuddle Up Hug mit gepolsterter Fußrolle



Baumwollbezug Cuddle Up Hug



Lagerungshilfe / gepolsterte Fußrolle

Cuddle Up Hug

Cuddle Up Hug ist eine weiche, bequeme und sichere Liegeumgebung mit räumlicher Begrenzung und Fußstütze für das Fröhchen. Wie im Mutterleib spürt das Fröhchen die weiche Abgrenzung in alle Richtungen, wobei die Seitenwände, sowie die Fußstütze aus latexfreiem Memoryschaum hergestellt sind.

Die Fußstütze ist erhöht, damit die Füßchen nicht über die Begrenzung rutschen und der Säugling ständig Kontakt hat. Die weichen regulierbaren Bänder ermöglichen Bewegung, vermitteln aber gleichzeitig das Gefühl der Geborgenheit und unterstützen die physiologische Lagerung.

Die optimale Beugung von Armen und Beinen des Säuglings werden unterstützt. Als ideales Komplementärprodukt sind hierfür die passenden Einweg-Saugunterlagen Bebe Chix erhältlich.

Das Cuddle Up Hug kann einzeln oder in Kombination mit der Heavenly Foam Mattress verwendet werden. Der passende Bezug besteht aus weicher Baumwolle.



Bestellinformationen

Produktbeschreibung	VPE	Art.-Nr.
Größe: Ultra Preemie (XS) - für sehr kleine Frühgeborene SSW 24-28		
Cuddle Up Hug seitliche Begrenzung mit Bein/Fußstütze vinylbezogen, ohne Bezug	6 Stück	SMB210
Baumwollbezug für Cuddle Up Hug	6 Stück	SMB210MW
Cuddle Up Hug, Einweg	10 Stück	SMB210EW
Größe: Preemie (S) - für Frühgeborene > 28 SSW		
Cuddle Up Hug seitliche Begrenzung mit Bein/Fußstütze vinylbezogen, ohne Bezug	6 Stück	SMB211
Baumwollbezug für Cuddle Up Hug	6 Stück	SMB211MW
Cuddle Up Hug, Einweg	10 Stück	SMB211EW
Größe: Large Preemie (M) - für große Frühgeborene / Reifgeborene		
Cuddle Up Hug seitliche Begrenzung mit Bein/Fußstütze, vinylbezogen, ohne Bezug	6 Stück	SMB212
Baumwollbezug für Cuddle Up Hug	6 Stück	SMB212MW
Cuddle Up Hug, Einweg	10 Stück	SMB212EW

Bed Buddy™

Der BedBuddy™ ist ein wiederverwendbarer, abwischbarer Lagerungsschlauch, der als räumliche Begrenzung und anschmiegsame Berührungsfläche bei früh- und reifgeborenen Säuglingen eingesetzt wird. Die Füllung besteht aus superweichen TPE Kügelchen, die weder ausdünsten noch an Struktur einbüßen oder im Material schwinden.

Der Lagerungsschlauch ist individuell formbar, dann aber formstabil und imitiert den Schutz und die Geborgenheit des Mutterleibes. Er hilft die korrekte physiologische Beugung aufrecht zu erhalten und den Säugling zu selbst beruhigendem Verhalten anzuregen.

Der Säugling kann in der Seitenlage gestützt und in Bauch- und Rückenlage räumlich begrenzt werden, das gibt Sicherheit und fördert die Entwicklung der Muskeln. Durch das Angebot verschiedener Schutzbezüge kann individuell entschieden werden, welches Material am Säugling zum Einsatz kommen soll.



Der Säugling liegt stabil und mit direktem Kontakt zur räumlichen Begrenzung. Das gibt Geborgenheit, fördert die Entwicklung und reduziert Stress.



BedBuddy™



Baumwollbezug BedBuddy™



Einwegbezug BedBuddy™

Bestellinformationen

Produktbeschreibung	VPE	Art.-Nr.
Größe: XS Ultra Preemie (XXS) - für sehr kleine Frühgeborene 24 - 26 SSW		
BedBuddy™ universeller vinylbezogener Lagerungsschlauch aus latexfreiem, viskoelastischem Schaum gefüllt mit weichen Perlen - 76cm lang	6 Stück	SMB360
Baumwollbezug waschbar, für BedBuddy™ Lagerungshilfe	10 Stück	SMB360MW
Einwegbezug für BedBuddy™ Lagerungshilfe	20 Stück	SMB360EW
Größe: Ultra Preemie (XS) - für kleine Frühgeborene 27 - 30 SSW		
BedBuddy™ universeller vinylbezogener Lagerungsschlauch aus latexfreiem, viskoelastischem Schaum gefüllt mit weichen Perlen - 91cm lang	6 Stück	SMB361
Baumwollbezug waschbar, für BedBuddy™ Lagerungshilfe	10 Stück	SMB361MW
Einwegbezug für BedBuddy™ Lagerungshilfe	20 Stück	SMB361EW
Größe: Preemie (S) - für Frühchen		
BedBuddy™ universeller vinylbezogener Lagerungsschlauch aus latexfreiem, viskoelastischem Schaum gefüllt mit weichen Perlen - 112cm lang	6 Stück	SMB362
Baumwollbezug waschbar, für BedBuddy™ Lagerungshilfe	10 Stück	SMB362MW
Einwegbezug für BedBuddy™ Lagerungshilfe	20 Stück	SMB362EW
Größe: Newborn (M) - für Neugeborene		
BedBuddy™ universeller vinylbezogener Lagerungsschlauch aus latexfreiem, viskoelastischem Schaum gefüllt mit weichen Perlen - 152cm lang	6 Stück	SMB363
Baumwollbezug waschbar, für BedBuddy™ Lagerungshilfe	10 Stück	SMB363MW
Einwegbezug für BedBuddy™ Lagerungshilfe	20 Stück	SMB363EW



Bed Buddy Diana



Baumwollbezug Bed Buddy Diana



Einwegbezug Bed Buddy Diana

Bed Buddy Diana

Der BedBuddy Diana ist eine wiederverwendbare, abwischbare Lagerungshilfe mit hochgezogenem Fußteil, die zur räumlichen Begrenzung und anschmiegsamen Berührungsfläche bei Früh- und Reifgeborene Säuglingen eingesetzt wird.

Die Lagerungshilfe ist individuell formbar, dann formstabil & ahmt den Schutz und die Geborgenheit des Mutterleibes nach. Sie hilft hervorragend die korrekte physiologische Beugung aufrecht zu erhalten und den Säugling zu selbst beruhigendem Verhalten anzuregen. Der Säugling kann in der Seitenlage gestützt und in Bauch- und Rückenlage räumlich begrenzt werden, das gibt Sicherheit und fördert die Entwicklung der Muskeln.

Das erhöhte Fußteil verhindert, dass die Füße über die Oberseite rutschen und so den Kontakt zur räumlichen Begrenzung verlieren. Durch das Angebot verschiedener Schutzbezüge kann individuell entschieden werden, welches Material am Säugling zum Einsatz kommen soll.

BedBuddy Diana in Kombination mit Cuddle Up. Der Säugling hat räumliche Berührungs- Begrenzung und Schutz aus allen Richtungen.



Bestellinformationen

Produktbeschreibung	VPE	Art.-Nr.
Größe: XS Ultra Preemie (XXS) - für sehr kleine Frühgeborene 24 - 26 SSW		
BedBuddy Diana ist eine universelle, vinylbezogene Lagerungshilfe mit hochgezogenem Fußteil aus latexfreiem, viskoelastischem Schaum gefüllt mit weichen Perlen - 84cm lang	10 Stück	SMB370
Baumwollbezug waschbar, für BedBuddy Diana Lagerungshilfe	10 Stück	SMB370MW
Einwegbezug für BedBuddy Diana Lagerungshilfe	20 Stück	SMB370EW
Größe: Ultra Preemie (XS) - für kleine Frühgeborene 27 - 30 SSW		
BedBuddy Diana ist eine universelle, vinylbezogene Lagerungshilfe mit hochgezogenem Fußteil aus latexfreiem, viskoelastischem Schaum gefüllt mit weichen Perlen - 99cm lang	10 Stück	SMB371
Baumwollbezug waschbar, für BedBuddy Diana Lagerungshilfe	10 Stück	SMB371MW
Einwegbezug für BedBuddy Diana Lagerungshilfe	20 Stück	SMB371EW
Größe: Preemie (S) - für Frühgeborene > 30 SSW		
BedBuddy Diana ist eine universelle, vinylbezogene Lagerungshilfe mit hochgezogenem Fußteil aus latexfreiem, viskoelastischem Schaum gefüllt mit weichen Perlen - 119cm lang	6 Stück	SMB372
Baumwollbezug waschbar, für BedBuddy Diana Lagerungshilfe	10 Stück	SMB372MW
Einwegbezug für BedBuddy Diana Lagerungshilfe	20 Stück	SMB372EW
Größe: Newborn (M) - für reifgeborene Säuglinge		
BedBuddy Diana ist eine universelle, vinylbezogene Lagerungshilfe mit hochgezogenem Fußteil aus latexfreiem, viskoelastischem Schaum gefüllt mit weichen Perlen - 160cm lang	6 Stück	SMB373
Baumwollbezug waschbar, für BedBuddy Diana Lagerungshilfe	10 Stück	SMB373MW
Einwegbezug für BedBuddy Diana Lagerungshilfe	20 Stück	SMB373EW

Nest™

Diese spezielle Unterlage birgt ein Geheimnis: die auf der Rückseite eingenähten Taschen mit Klettverschlüssen ermöglichen die individuelle Positionierung der hypoallergenen Lagerungssäckchen mit Vinylbezug! Diese Kombination ist das perfekte Hilfsmittel zur Pflege von Säuglingen, die negativ auf Berührungen reagieren.

Mit diesem patentierten System können Sie empfindliche Säuglinge in weniger als 5 Sekunden drehen und gleichzeitig den Rücken des Säuglings stützen. Selbst beatmete Säuglinge können in weniger als 15 Sekunden gedreht werden. Das Nest™ Lagerungssystem schafft Grenzen und schmiegt sich an den Säugling an.

Das Lagerungssystem ist in zwei Größen erhältlich - für kleine Frühchen und Früh- und Reifgeborene mit Problemen, einschließlich Krampfanfällen oder Entzugsercheinungen.


Bestellinformationen

Produktbeschreibung	VPE	Art.-Nr.
Größe: Preemie (S) - für kleine Frühgeborene ca. SSW 24-30		
Nest™ Lagerungssäckchen mit Vinylbezug gefüllt mit super weichen TPE Kügelchen zum Einstecken in den Nestbezug Art.-Nr. SMB320MW	10 Stück	SMB320
Baumwollbezug waschbar, für Nest™ Lagerungshilfe	12 Stück	SMB320MW
Schutzbezug Einweg für Nest™ Lagerungshilfe	20 Stück	SMB320/321EW
Größe: Newborn (M) - für Früh- & Reifgeborene ab > SSW 31		
Nest™ Lagerungssäckchen mit Vinylbezug gefüllt mit super weichen TPE Kügelchen zum Einstecken in den Nestbezug Art.-Nr. SMB321MW	10 Stück	SMB321
Baumwollbezug waschbar, für Nest™ Lagerungshilfe	12 Stück	SMB321MW
Schutzbezug Einweg für Nest™ Lagerungshilfe	20 Stück	SMB320/321EW



Nest™



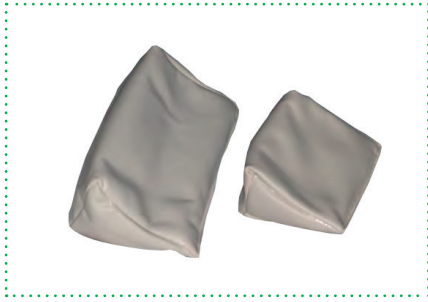

Wedge Pillow



Wedge Pillow Keillagerungskissen

Die Wedge Pillow Lagerungshilfen sind eine wiederverwendbare, abwischbare Multifunktionslagerungshilfe in Keilform, die mit sehr weichen TPE Kügelchen gefüllt sind.

Diese Kügelchen fühlen sich an wie Gel, haben aber den großen Vorteil, dass sie weder ausdünsten noch an Struktur verlieren. Für das Keillagerungskissen gibt es vielseitige Anwendungsmöglichkeiten z.B. zur schnellen Lagestabilisierung, zur Unterlagerung von Beatmungsschläuchen etc.

Bestellinformationen

Produktbeschreibung	VPE	Art.-Nr.
Größe: Ultra Preemie (XS) - für sehr kleine Frühgeborene ca. SSW 24-28		
Wedge Pillow Keillagerungskissen mit Vinylbezug, gefüllt mit super weichen TPE Kügelchen	10 Stück	SMB314
Baumwollbezüge waschbar, für die Lagerungshilfe Wedge Pillow	10 Stück	SMB314MW
Einwegbezüge für die Lagerungshilfe Wedge Pillow	20 Stück	SMB314EW
Größe: Preemie (S) - für Frühgeborene > SSW 28		
Wedge Pillow Keillagerungskissen mit Vinylbezug, gefüllt mit super weichen TPE Kügelchen	10 Stück	SMB315
Baumwollbezüge waschbar, für die Lagerungshilfe Wedge Pillow	10 Stück	SMB315MW
Einwegbezüge für die Lagerungshilfe Wedge Pillow	20 Stück	SMB315EW

Abdominal Pillow

Lagerungskissen zur Stabilisierung der Körperhaltung - diese Kissen unterstützen das physiologische und neurologische Wachstum des Frühgeborenen. Die Unterstützung der Positionierung des Frühchens verhindert wirksam eine Abduktion der Hüften und Schultern und hilft einen runden Kopf zu erzeugen.

Die weiche Memory-Schaum Füllung fördert durch die erhöhte Lage des Oberkörpers, die Beugung von Armen und Beinen, ohne dass ein übermäßiger Druck auf Knie und Ellbogen des Säuglings ausgeübt wird. Zwei Größen dieser Haltungskissen stehen zur Verfügung: die Größe XS ist gemacht für Frühchen der SSW 24-28, die Größe S für alle älteren Frühchen.

Die Kissen sind röntgendurchlässig! In Kombination mit einer stabilen räumlichen Begrenzung des Säuglings, wie z. B. durch Cuddle Up Hug oder BedBuddy, gewährleistet das Bauchlagerungskissen eine standardisierte und beständige Unterstützung des Säuglings in der Bauchlage und sorgt gleichzeitig für eine sichere, ausgeglichene und gebeugte Körperposition.



Das Baby liegt, zur Unterstützung in der Bauchlage, auf dem Bauchlagerungskissen und der Rücken wird mit dem BedBuddy gestützt. Die Heavenly Foam Mattress bildet die ideale, weiche Unterlage für diese Lagerung.

Bestellinformationen

Produktbeschreibung	VPE	Art.-Nr.
Größe: Ultra Preemie (XS) - für sehr kleine Frühgeborene ca. SSW 24-28		
Bauchlagerungskissen abwaschbar aus vinylbeschichtetem, latexfreiem, viskoelastischem Memoryschaum	10 Stück	SMB260
Baumwollbezug für Bauchlagerungskissen	10 Stück	SMB260MW
Einwegbezug für Bauchlagerungskissen	20 Stück	SMB260EW
Größe: Preemie (S) - für Frühgeborene > SSW 28		
Bauchlagerungskissen abwaschbar aus vinylbeschichtetem, latexfreiem, viskoelastischem Memoryschaum	10 Stück	SMB261
Baumwollbezug für Bauchlagerungskissen	10 Stück	SMB261MW
Einwegbezug für Bauchlagerungskissen	20 Stück	SMB261EW



Abdominal Pillow



Baumwollbezug Abdominal Pillow



Einwegbezug Abdominal Pillow



Wonder Star



Baumwollbezug Wonder Star



Einwegbezug Wonder Star

Wonder Star

Der abwischbare Wonder Star ist eine vielseitig einsetzbare Lagerungshilfe in Sternform, der von einer Kinderkrankenschwester auf der neonatologischen Intensivstation entwickelt wurde. Er kann individuell um Kopf, Nacken oder Hüften platziert werden oder zum Positionieren von Armen und Beinen verwendet werden.

Teile des Wonder Stars lassen sich je nach Bedarf separat formen und unterstützen so die optimale Lagerung des Säuglings im Sinne eines entwicklungsfördernden Konzeptes. Durch die Vinylbeschichtung und die erhältlichen Einwegbezüge ist der Wonder Star besonders hygienisch und langlebig.

Die Lagerungshilfe Wonder Star ist ein Multifunktions Hilfsmittel. Es kann so viele Bedürfnisse stillen: egal ob es den Kopf, oder den Körper hält - durch Einbettung des Säuglings die Situation der Gebärmutter imitiert - der Wonder Star kann alles.



Bestellinformationen

Produktbeschreibung	VPE	Art.-Nr.
Größe: Ultra Preemie (XS) - für kleine Frühgeborene		
Lil' Wonder Star Lagerungshilfe, abwischbar, ohne Bezug	10 Stück	SMB190
Baumwollbezüge waschbar, für die Lagerungshilfe Lil' Wonder Star	10 Stück	SMB190MW
Einwegbezüge für die Lagerungshilfe Lil' Wonder Star	20 Stück	SMB190EW
Größe: Preemie (S) - für Früh- & Reifgeborene		
Wonder Star Lagerungshilfe, abwischbar, ohne Bezug	10 Stück	SMB200
Baumwollbezüge waschbar, für die Lagerungshilfe Wonder Star	10 Stück	SMB200MW
Einwegbezüge für die Lagerungshilfe Wonder Star	20 Stück	SMB200EW

Neckroll

Die Nackenrollen mit abwischbarer Vinyloberfläche und sehr weichen, gelartigen TPE Perlen ersetzen die aufgerollten Waschlappen/ Handtücher. Sie dienen zur Unterstützung des kleinen Köpfchens und des empfindlichen Nackens. Die Nackenrolle wird durch einen Bezug Ihrer Wahl geschützt und dann in Rückenlage hinter den Nacken des Säuglings gelegt.



Achten Sie darauf, dass die Nackenzirkulation nicht durch Überstreckung beeinträchtigt wird. Erhältlich in 4 Größen, um den Bedürfnissen von ganz kleinen bis großen Säuglingen gerecht zu werden. Neben Ihrer Funktion im Nacken können Sie auch zur Lagerung von Extremitäten verwendet werden.



Neckroll



Baumwollbezug Nackenrolle



Einwegbezug Nackenrolle

Bestellinformationen

Produktbeschreibung	VPE	Art.-Nr.
Größe: Ultra Preemie (XS) - für sehr kleine Frühgeborene ca. SSW 24-28		
Nackenrolle mit Vinylbezug aus latexfreiem, viskoelastischem Schaum	10 Stück	SMB310
Baumwollbezüge waschbar, für die Lagerungshilfe Nackenrolle	10 Stück	SMB310MW
Einwegbezüge für die Lagerungshilfe Nackenrolle	20 Stück	SMB310EW
Größe: Preemie (S) - für Frühgeborene > SSW 28		
Nackenrolle mit Vinylbezug aus latexfreiem, viskoelastischem Schaum	10 Stück	SMB311
Baumwollbezug waschbar, für die Lagerungshilfe Nackenrolle	10 Stück	SMB311MW
Einwegbezüge für die Lagerungshilfe Nackenrolle	20 Stück	SMB311EW
Größe: Late-Term Preemie (M) - für große Frühgeborene		
Nackenrolle mit Vinylbezug aus latexfreiem, viskoelastischem Schaum	10 Stück	SMB312
Baumwollbezüge waschbar, für die Lagerungshilfe Nackenrolle	10 Stück	SMB312MW
Einwegbezüge für die Lagerungshilfe Nackenrolle	20 Stück	SMB312EW
Größe: Newborn (L) - für reifgeborene Säuglinge		
Nackenrolle mit Vinylbezug aus latexfreiem, viskoelastischem Schaum	10 Stück	SMB313
Baumwollbezüge waschbar, für die Lagerungshilfe Nackenrolle	10 Stück	SMB313MW
Einwegbezüge für die Lagerungshilfe Nackenrolle	20 Stück	SMB313EW



jellow Größe S



jellypad Größe L

jellow / jellypad

Weiche Lagerungshilfe für Früh- und Reifgeborene. Die weichen Gelpads dienen zur Lagerung von Patienten oder auch einzelnen Körperpartien, insbesondere von Frühgeborenen und Säuglingen.

Vorteile

- Verhindern Hautläsionen und Druckstellen
- Weich und anschmiegsam
- Zertifizierte biokompatible Materialien
- Frei von Latex, DEHP, BPA
- Im Inkubator verwendbar
- Einweg-Schutzbezug aus Vliesstoff optional
- Einfache Reinigung
- Einfache Entsorgung

Spezifikationen

- Einmalprodukt
- Klasse I MP
- Lagerungsdauer: 6 Monate
- Anwendungszeitraum: 1 Monat
- Oberflächenmaterial: Multi Layer Polyurethanfolie (200µm)
- Gelfüllung auf Wasserbasis: Sonogel®
- Patientengewicht:
 - Größe S ab 500g
 - Größe M ab 2,5kg
 - Größe L ab 10kg



Bestellinformationen

Produktbeschreibung	VPE	Art.-Nr.
jellow		
TCgelpad „jellow“ - Größe S (ab 500g Patientengewicht)	10 Stück	TC47357106
TCgelpad „jellow“ - Größe M (ab 2,5kg Patientengewicht)	10 Stück	TC47356106
TCgelpad „jellow“ - Größe L (ab 10kg Patientengewicht)	10 Stück	TC47355106
jellypad		
TCgelpad „jellypad“ - Größe S (ab 500g Patientengewicht)	10 Stück	TC47377106
TCgelpad „jellypad“ - Größe M (ab 2,5kg Patientengewicht)	10 Stück	TC47376106
TCgelpad „jellypad“ - Größe L (ab 10kg Patientengewicht)	10 Stück	TC47375106

Medibino Neo

Die Lagerung von frühgeborenen Säuglingen stellt in der Intensivpflege eine große Herausforderung dar. Neugeborene Babys generell, aber insbesondere Frühchen sind weniger aktiv und liegen häufig in einer Position. Dadurch sind bestimmte Körperstellen einer erhöhten Druckbelastung ausgesetzt. Da die Schädelknochen in den ersten Lebensmonaten noch sehr weich sind, ist der Kopf sensibel gegenüber dauerhaftem Druck.

Bei Frühgeborenen ist dies besonders kritisch, da der Schädel durch die geringe Reife bei der Geburt noch weicher ist und frühgeborene Babys häufig über mehrere Monate in der Klinik überwacht und dazu im Inkubator gelagert werden müssen. Kopfverformungen, wie Plagiozephalie, Brachyzeephalie und Dolichozeephalie, sind bei einseitiger Lagerung der Früh- und Reifgeborenen auf der Seite oder dem Rücken häufig die Folge.

Die Häufigkeit von Kopfverformungen bei Frühgeborenen wird in Studien mit bis zu 90% angegeben. Mit dem Medibino Neo Lagerungssystem stellen wir eine Lösung für die druckentlastende Lagerung und Stabilisierung der Kopfmittellage von Frühgeborenen und Säuglingen während eines langen Krankenhausaufenthaltes bereit.

Bestellinformationen

Produktbeschreibung	VPE	Art.-Nr.
Größe S (Frühgeborene bis 800 g)		
Gelring (90mm x 80mm x 18mm)	1 Stück	KM240211
Innenkissen gefüllt mit Softgranulat	1 Stück	KM240211K
Baumwollbezug, waschbar bis 60 °C	1 Stück	KM240211MW
Einwegbezug	50 Stück	KM240211EW
Einwegbezug mit Softgranulat gefülltem Innenkissen	50 Stück	KM240211EW+
Größe M (Frühgeborene zwischen circa 800g and 2000g)		
Gelring (110mm x 95mm x 22mm)	1 Stück	KM240212
Innenkissen gefüllt mit Softgranulat	1 Stück	KM240212K
Baumwollbezug, waschbar bis 60 °C	1 Stück	KM240212MW
Einwegbezug	50 Stück	KM240212EW
Einwegbezug mit Softgranulat gefülltem Innenkissen	50 Stück	KM240212EW+
Größe L (Frühgeborene über 2000g and Reifgeborene)		
Gelring (130mm x 110mm x 25mm)	1 Stück	KM240213
Innenkissen gefüllt mit Softgranulat	1 Stück	KM240213K
Baumwollbezug, waschbar bis 60 °C	1 Stück	KM240213MW
Einwegbezug	50 Stück	KM240213EW
Einwegbezug mit Softgranulat gefülltem Innenkissen	50 Stück	KM240213EW+



Medibino Neo





Reflux Wedge / Bed Buddy



Lagerungshilfe Reflex Wedge



Baumwollbezug Reflex Wedge

Reflux Wedge

Das Keillagerungskissen wurde für die einfache und sichere Oberkörperhochlagerung von früh- und reifgeborenen Säuglingen bei Reflux entwickelt. Das Keillagerungskissen wird aus dem bekannten, strapazierfähigen, latexfreien, viskoelastischen Memory-Schaum hergestellt und kann auf der einen Seite für frühgeborene und anders herum für reifgeborene Säuglinge eingesetzt werden.


Das Keilkissen passt in nahezu alle Inkubatoren- und Wärmebettchen, die verschiedenen Bezüge für das Keilkissen runden die therapeutischen Optionen ab.

Bestellinformationen

Produktbeschreibung	VPE	Art.-Nr.
Reflux Keil-Lagerungskissen - für Frühgeborene		
Reflux Keil-Lagerungskissen abwaschbar aus vinylbeschichtetem, latexfreiem, viskoelastischem Memoryschaum, ohne Bezug	4 Stück	SMB350
Bezüge ohne Fixierungsbändchen		
Baumwollbezug für Reflux Keil-Lagerungskissen, Standard	10 Stück	SMB350MW
Einwegbezug für Reflux Keil-Lagerungskissen, Standard	20 Stück	SMB350EW
Bezüge mit Fixierungsbändchen		
Baumwollbezug mit Haltebändchen für Reflux Keil-Lagerungskissen, Standard	10 Stück	SMB350MWB
Einwegbezug mit Haltebändchen für Reflux Keil-Lagerungskissen, Standard	20 Stück	SMB350EWB

Bebe Chix

Diese Unterlage ist zur Vorbeugung von kleinen Mißgeschicken bei der Fütterungen, Blutabnahmen oder z.B. Wickelrunde gedacht. Die Unterlage ist super weich und saugfähig und kann dadurch z.B. zum Schutz der Heavenly Foam-Matratzen, der Cuddle-Ups, oder dem Nest verwendet werden. Sparen Sie sich das Waschen! Die Unterlagen sind kostengünstig in der Anwendung und sehr praktisch.

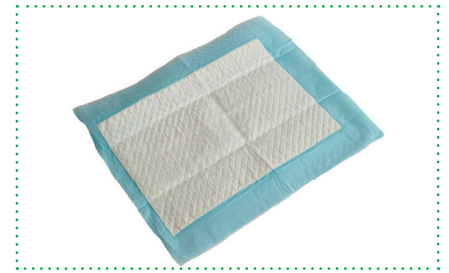

Bebe Chix



Ob bei der Blutentnahme, Sondenfütterung oder dem Windelwechsel, die Bebe Chix schützt sicher und kostengünstig und vermeidet so unnötigen Wäschewechsel.

Bestellinformationen

Produktbeschreibung	VPE	Art.-Nr.
Bebe Chix - besonders weiche Saugunterlagen für das kleine Mißgeschick, Größe 30,5 x 25,5cm	80 Stück	SMB380

GEBURTSHILFE & INTEGRATIVE NEUGEBORENENVERSORGUNG
SCHWANGERSCHAFT & STILLEN
ENTWICKLUNGSFÖRDERNDE PFLEGE
NEONATOLOGIE & PÄDIATRISCHE INTENSIVMEDIZIN
ANÄSTHESIE & INTENSIVMEDIZIN FÜR ERWACHSENE